


TLCの鮮明画像をデータ化

TLCイメージリーダー RE-X10


反応から精製までのTLCとの連動を実現

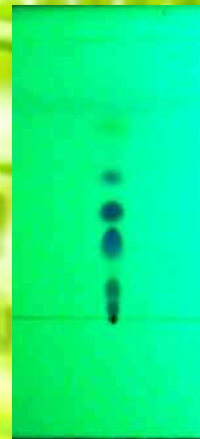


スマートフラッシュと連動



TLC イメージリーダー
RE-X10

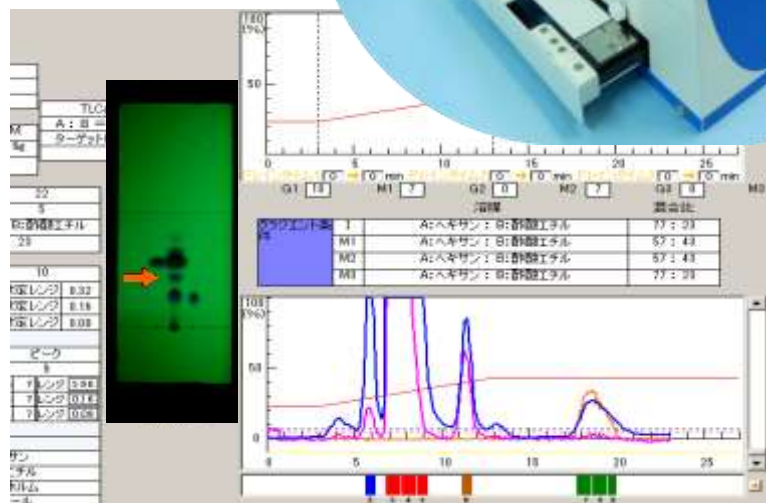

TLC 画像とクロマト結果画面

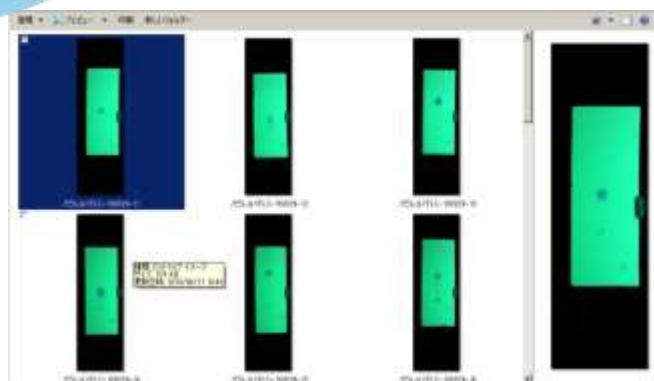

TLC 画像データ




山 善 株 式 会 社


TLCイメージリーダー RE-X10

■キャビネット内でTLCをUV照射してスポットを直接画面表示します

■合成反応におけるTLC画像をいつでも記録します

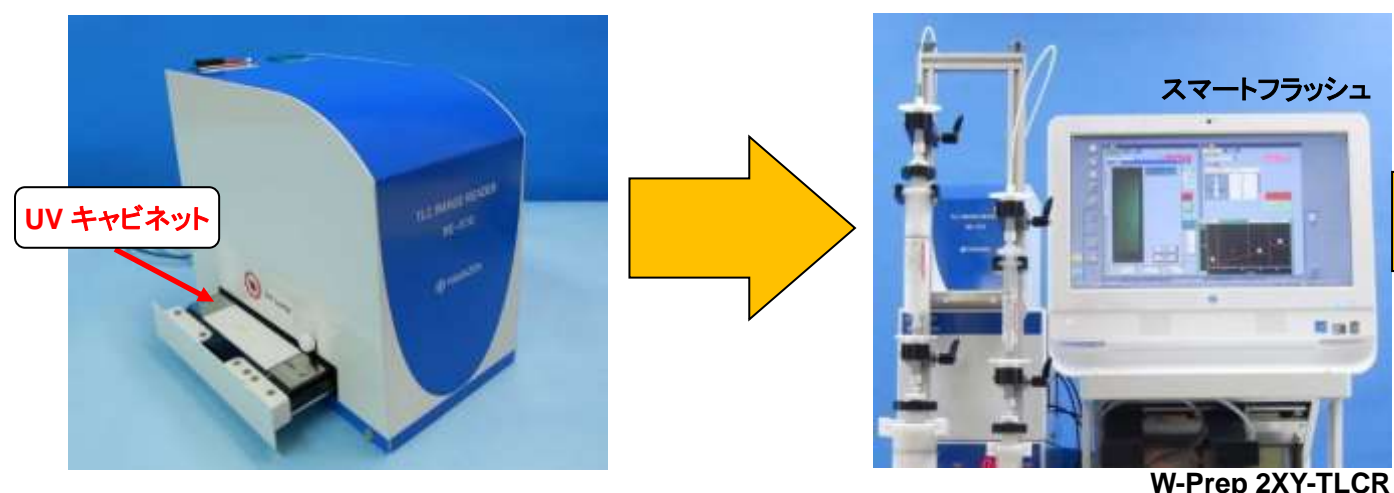


— 反応モニターから分取精製まで —

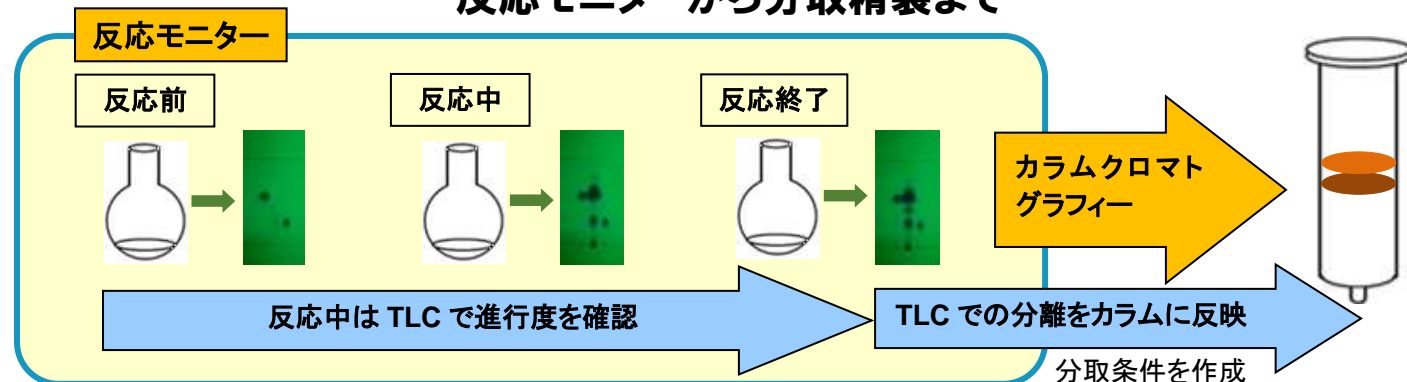


— そして —

■TLCと分取精製を一元データ化

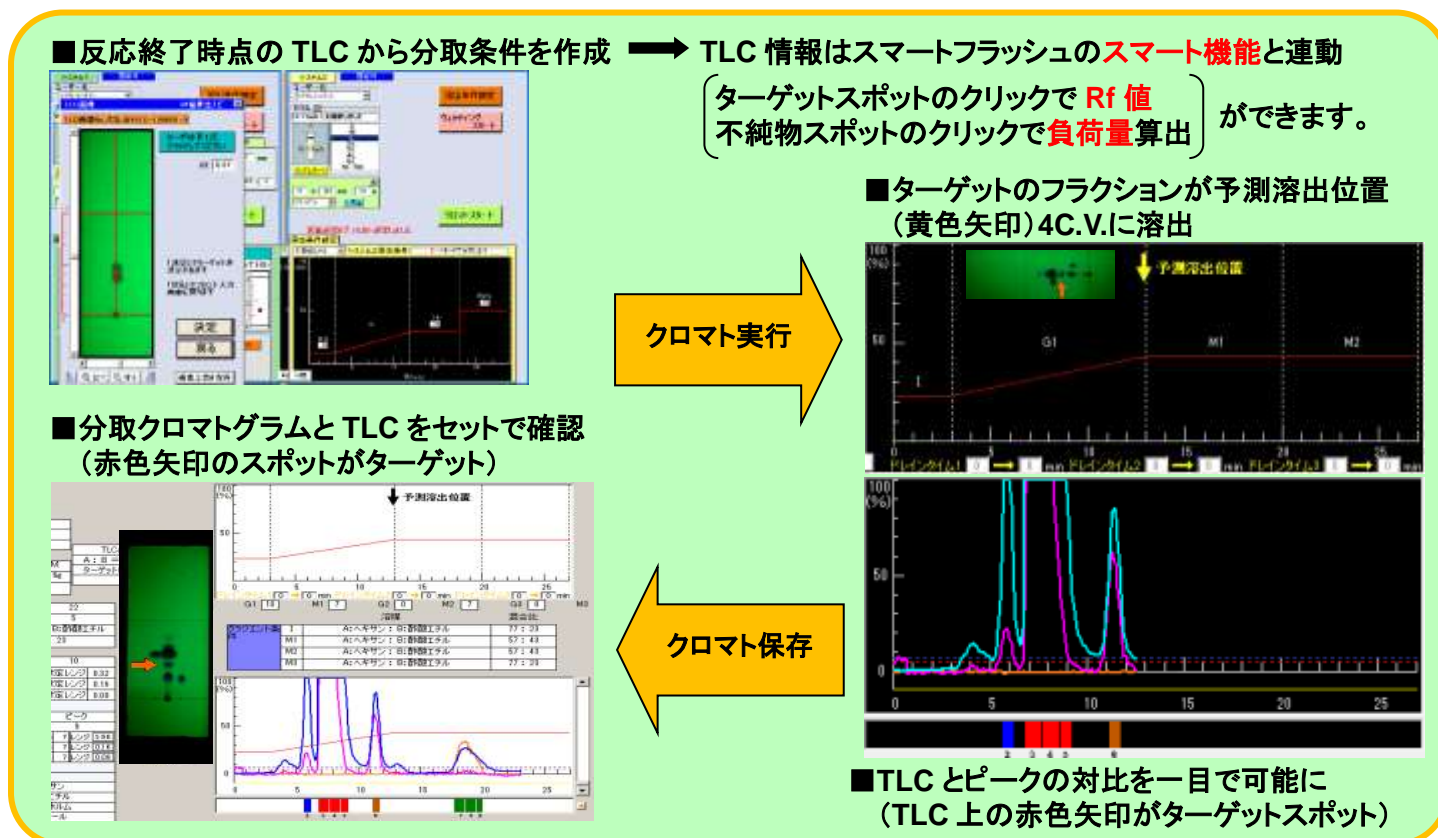

TLCを画像表示

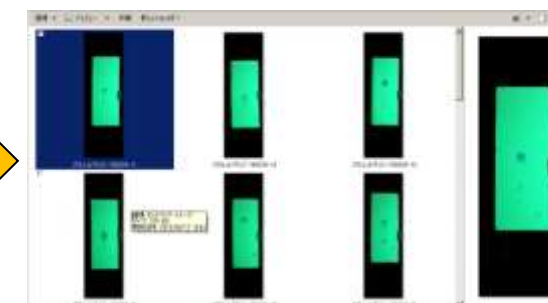

■様々なスポット形状がそのまま鮮明に表示・記録

●スポットを鮮明に見ることができます




●テーリングの度合いも確認できます




●低吸光度の小さなスポットも確認できます




●マルチスポットも確実に記録します

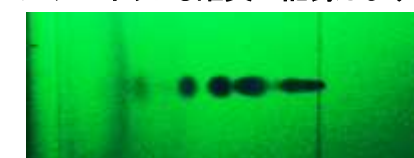

反応前・反応中・反応後のTLCスポットの変化を正確に画像記録することができます。

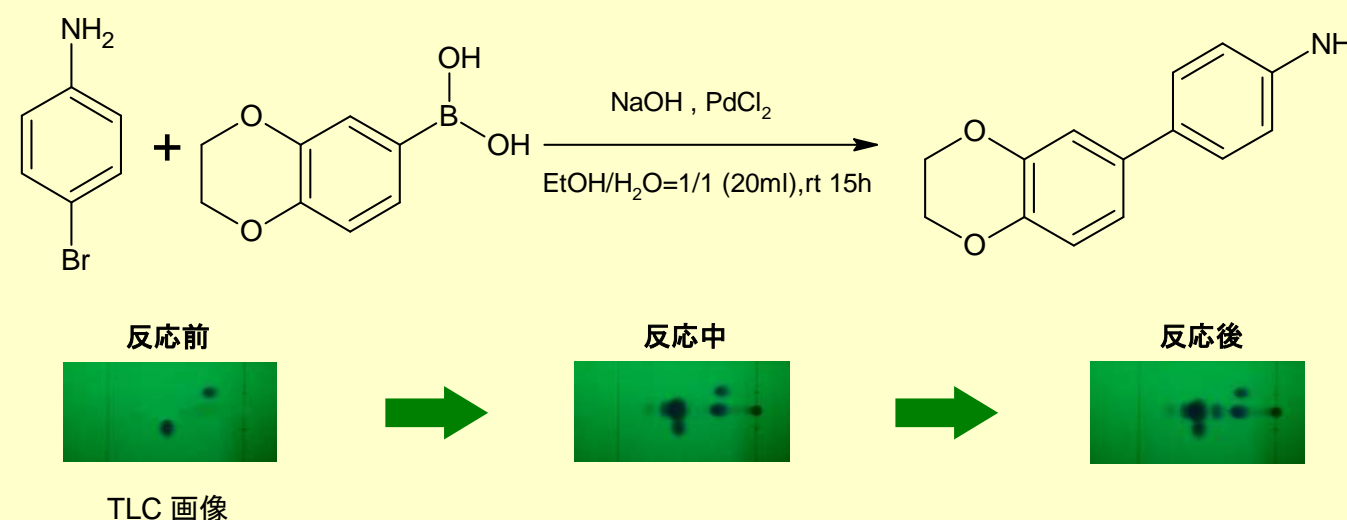

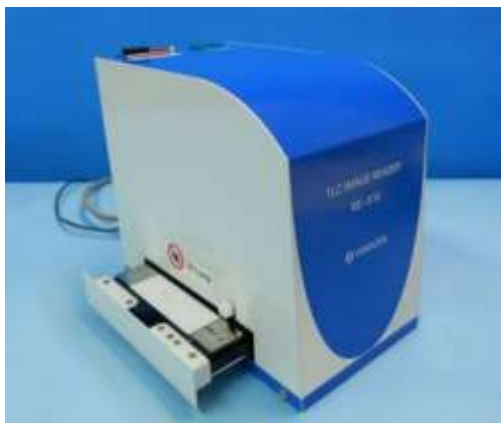


TLC イメージリーダー RE-X10

サイズ	W:255mm × D:330mm × H:300mm
重量	14kg
電源	AC100V (50/60Hz)
消費電力	180W
光源	水銀ランプ (UV-C)、蛍光灯 (可視光) 切替式
定価	¥ 330,000-



Smart Flash AKROS

分取精製システム Smart Flash シリーズに TLC イメージリーダーを一体化し、スムーズな操作性のインターフェイス「AKROSモード」を備えた Smart Flash の上位機種です。

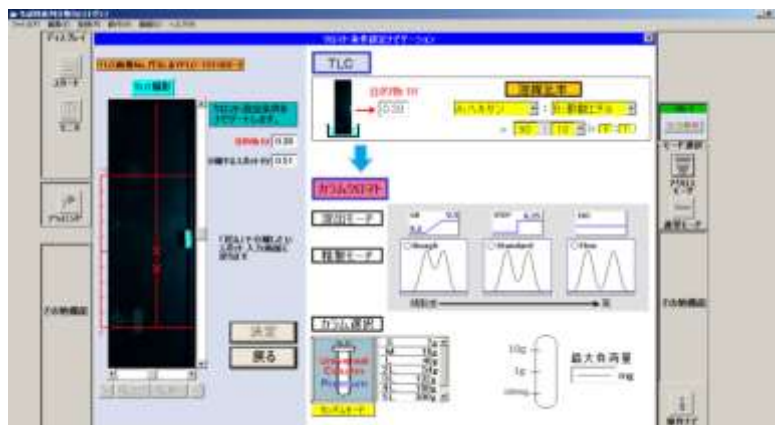

スポット抽出機能付き TLC イメージリーダー RE-X10 TLC-Reader-Extractor

TLC イメージリーダーにスポット抽出機能を追加しています。
Smart Flash MS と接続することで、TLC の画像だけでなくスポットの MS スペクトル情報も併せて記録し、TLC の情報価値を高めることができます。

また、Smart Flash MS での試験管スペクトルと対比することで、分画物の判断をより確実にします。

〈 発 売 元 〉



山 善 株 式 会 社

本 社 〒532-0011 大阪市淀川区西中島5-14-22(リクルート新大阪ビル3階)
TEL. 06(6304)5839 FAX. 06(6304)3681
応用開発室 〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-6-10(三和ビル1階)
TEL. 06(6304)7284 FAX. 06(6304)7283
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町17番地(秋元ビル)
TEL. 03(5256)6481 FAX. 03(5256)6480
E-mail info@yamazenc.co.jp
Home Page http://www.yamazenc.co.jp

〈 販売代理店 〉